



Equibiomedic

Venta, alquiler y reparación de equipos biomédicos.

CATÁLOGO

Equipos Biomédicos

Medellín - Colombia

Mesa Quirúrgica NOT 5600

R\

Radio traslúcida
para toma de RX con arco en C.




Mesa Quirúrgica NOT 5600

- ▶ Para cirugías en general y aplicaciones específicas.
- ▶ Sistema Electrohidráulico integrado.
- ▶ Fabricada en acero inoxidable.
- ▶ Radio traslúcido para toma de RX.
- ▶ Proporciona movimiento longitudinal para la toma de RX
- ▶ Mecanismo integrado de puente riñón.
- ▶ Hasta 100 accionamientos con batería interna (opcional)
- ▶ Kit de ortopedia (opcional).
- ▶ Set de parto/urología (opcional).
- ▶ Kit de accesorios mesas Beng (opcional)
- ▶ Rango de altura de 650 a 900mm (opcional, NOT 5600SKNB)

Las mesas quirúrgicas están diseñadas para lograr funciones de usos múltiples, eléctricamente accionadas e hidráulicamente operada a través de un control manual, control de pie (opcional), o control auxiliar (opcional).

El marco de la mesa está hecha de aluminio fundido con base resistente al desgaste y las cubiertas de columna son de acero inoxidable para proporcionar resistente a impactos, roturas y desinfectantes.

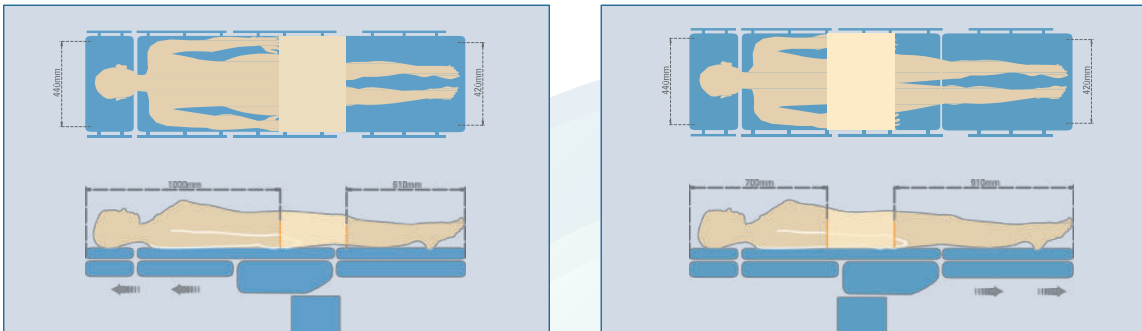

Enfoque Clínico

La mesa de operaciones **NOT 5600 SK(F)** está diseñada para posicionar con eficacia a los pacientes, facilitar el acceso y control de cualquiera de los equipos quirúrgicos o Arco en C y garantizar la seguridad y comodidad del paciente. Para satisfacer las necesidades de productividad, facilidad de uso, facilidad de mantenimiento, fiabilidad a largo plazo y Durabilidad, estos nuevos modelos se crean para cumplir con esta misión en la más atractiva relación entre precio–rendimiento.

Radio traslúcida

Permite la toma de rayos x con Arco en C en diferentes ángulos de exposición.

Control de Mano

Alcanza las posiciones deseadas de manera suave y precisa

Columna Única

Se puede colocar la mesa en la posición deseada y esto puede alcanzarse efectivamente.

Soporte en forma de T

Facilita el acceso del equipo quirúrgico y la estabilidad de la mesa.

Soporte en forma de T

Facilita el acceso del equipo quirúrgico y la estabilidad de la mesa.

Piernerias divididas y desmontables



Permite la colocación horizontal o vertical ajustable de las piernas.

Mesa con desplazamiento longitudinal

Desplazamiento longitudinal de 300 mm y radiotraslúcida, facilitando el acceso del Arco en C, teniendo cobertura completa de imágenes sin mover al paciente. (5600 SKF series)

Mecanismo de bloqueo central de piso

Fija la mesa Fácil y firme en el lugar

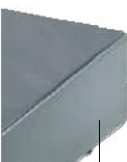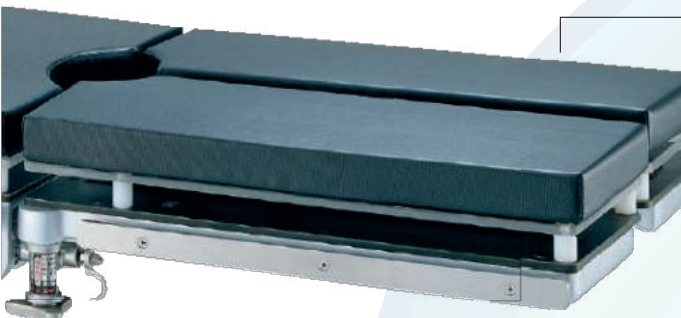

Especificaciones Técnicas:

Longitud de la mesa (incluyendo cabecera)	1950mm
Ancho de la mesa (con rieles laterales)	500 mm (19.7")
Alto de la mesa (arriba/abajo)	710-1015mm
Cabecera (amba/abajo)	60°/90°
Braceras (amba/abajo)	90°/5°
Piernerias (arriba/abajo)	15°/90°
Piernerias (posicion horizontal)	00.900
Trendelemburg / trendelenburg inverso	26°/26°
inclinacion Lateral (izq/der)	21°/21°
Flexion/deflexion	2100/1200
Máximo peso de paciente	150Kg
Movimiento Longitudinal	300mm

Accesorios que incluye

- ▶ 1 Cabecera: Se puede subir, bajar y quitar manualmente.
- ▶ 1 Espaldar: Se puede subir y bajar electro-hidráulica.
- ▶ 1 Puente Riñón: Se puede subir y bajar manualmente.
- ▶ 2 Piernerias: Se puede subir, bajar, horizontal.
- ▶ Colocar y retirar manualmente.
- ▶ 2 Braceras: Diseño plegable y desmontable.

Control de pie (Opcional)

- ▶ 1 Control de mano
- ▶ 1 Juego de cojines



1 CABLE MARCAPASOS PARCHES DESFIBRILADOR MINDRAY D6
1 PARCHES ADULTO PARA DESFIBRILADOR MINDRAY D6
6 SENSOR DE TEMPERATURA PARA MONITOR MEC 1200
1 BATERIA PARA MAQUINA DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX 20




Aplicaciones

Ideal para cirugías generales y aplicaciones específicas.


► Algunas de estas aplicaciones requieren de accesorios opcionales.



CIRUGÍA DE VEJIGA,
LITOTOMÍA

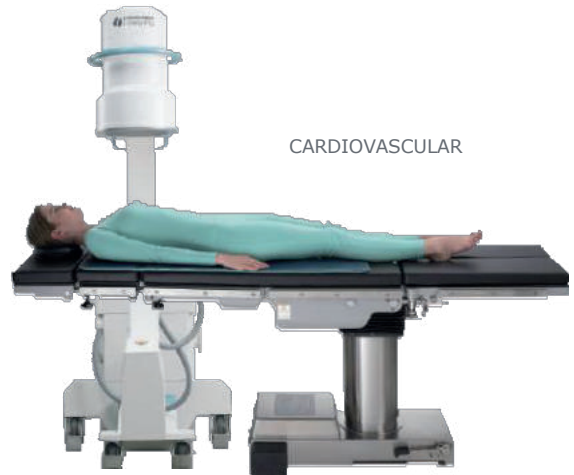


CARDIOVASCULAR

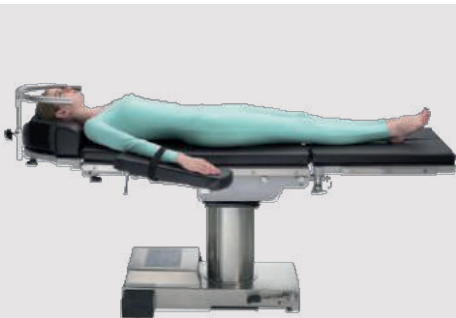

CIRUGÍA PLÁSTICA/
OFTALMOLOGÍA Y FACIAL



CIRUGÍA RECTAL

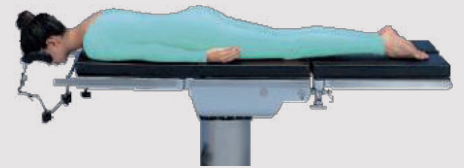

NEUROCIRUGÍA/
CRANEOTOMÍA



CIRUGÍA E.N.T



CIRUGÍA ESPINAL



CIRUGÍA DE ARTROSCOPIA
DE RODILLA



CIRUGÍA DE ARTROSCOPIA/
HOMBRO TOTAL



CIRUGÍA DE ORTOPEDIA
Y TRAUMATOLOGÍA



UROLOGÍA



Equibiomedic

Venta, mantenimiento y alquiler de equipos biomédicos.



PBX: (057) (4) **444 08 38** / Cel: **310 460 7889**



www.equibiomedic.com



Medellín - Colombia

