



# Equibiomedic

Venta, alquiler y reparación de equipos biomédicos.

CATÁLOGO

# Equipos Biomédicos

---

Medellín - Colombia

Mesa Quirúrgica

# NOT 5600SKF



- ▶ Alta capacidad de carga: 273 kg de carga de trabajo
- ▶ Radio traslúcido para toma de RX.
- ▶ Rango de altura de 650 a 900mm (opcional, NOT 5600SN)
- ▶ Estructura fabricada en acero inoxidable para mayor durabilidad.
- ▶ Inclinación lateral 21° por lado para facilitar cirugías MIS y endoscópicas.
- ▶ Sistema electrohidráulico integrado para movimientos precisos y silenciosos
- ▶ Control de mano alámbrico


## Áreas de uso



# Características



Batería recargable  
integrada

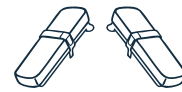

Braceras  
abatibles



Puente Renal  
integrado

La NOT-5600SKF es una **solución versátil y robusta para salas de cirugía** de cualquier nivel de complejidad.

Su **sistema electrohidráulico integrado** con **batería recargable incorporada** y su **superficie radiotranslúcida** permiten un posicionamiento preciso, seguro y continuo del paciente, optimizando los tiempos quirúrgicos y facilitando la toma de imágenes intraoperatorias, incluso ante eventuales interrupciones del suministro eléctrico.

Gracias a su rango completo de movimientos (**Trendelenburg, inclinación lateral, flexión y extensión**) y a la **opción de puente renal integrado**, la mesa se adapta a procedimientos generales y especializados.

Su diseño en acero inoxidable y su fácil limpieza aseguran **durabilidad y cumplimiento con los estándares de habilitación**, garantizando un entorno seguro y confiable para el paciente y el equipo quirúrgico.




# Características Principales

## Mesa Quirúrgica NOT 5600SKF

### Especificaciones de funcionamiento

▶ Longitud de la mesa (incluyendo cabecera)	▶ 1.950 mm
▶ Longitud de la mesa (sin cabecera)	▶ 1.690 mm
▶ Ancho de la mesa (con rieles laterales)	▶ 552 mm
▶ Ancho de la mesa (sin rieles laterales)	▶ 500 mm
▶ Altura de la mesa (arriba/abajo)	▶ 760 -1070 mm 650 – 900 mm (Opcional NOT 5600NS)
▶ Desplazamiento longitudinal	▶ 300 mm
▶ Cabecera (arriba/abajo)	▶ 60°/ -90°
▶ Espaldar (arriba/abajo)	▶ 80°/ -40°
▶ Pierneras (arriba/abajo)	▶ 15°/-90°
▶ Pierneras (posición horizontal)	▶ 0° - 180°
▶ Trendelenburg / trendelenburg inverso	▶ 26°/26°
▶ Inclinación Lateral (izq/der)	▶ 21°/21°
▶ Flexión/deflexión	▶ 220°/100°
▶ Máximo peso de paciente Carga estática* / carga de trabajo (kg)	▶ 360kg/273 kg
▶ Elevación de puente riñón	▶ 121 mm
▶ Peso de la mesa	▶ 259 kg

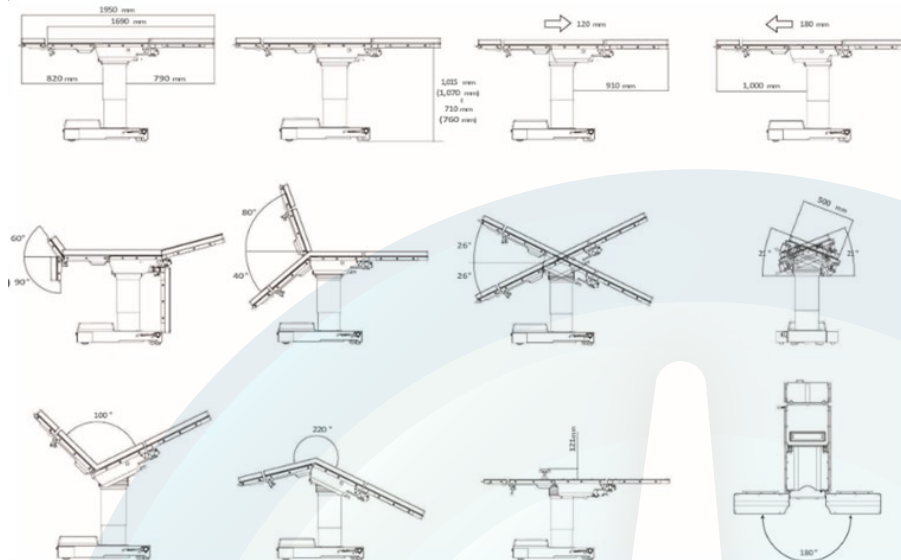

### Especificaciones ambientales

#### Funcionamiento:

- ▶ Temperatura: 10° ~ 40°C
- ▶ Humedad relativa: 30% ~ 75%
- ▶ Presión atmosférica: 70 KPa ~ 106 KPa

#### Almacenamiento:

- ▶ Temperatura: -20° a 50°C
- ▶ Humedad relativa: 20 % a 80%
- ▶ Presión atmosférica: 50 KPa a 106 KPa

#### Especificaciones de alimentación

- ▶ Voltaje: 100-240V
- ▶ Frecuencia: 50Hz/60Hz
- ▶ Batería: 12V, 12.0 Ah
- ▶ Ciclo de trabajo: 65/70 Accionamientos



# Características Principales

## Mesa Quirúrgica NOT 5600SKF

### Especificaciones físicas



#### Puente renal integrado

El puente renal integrado permite la operación fuera del campo estéril, a la izquierda o a la derecha del cabezal, lo que ayuda a evitar la interferencia con los procedimientos quirúrgicos y la contaminación del campo estéril. El puente renal también es translúcido a los rayos X. (Solo el modelo K cuenta con esta función)

### 21° de inclinación lateral



Los grados de inclinación lateral mejoran aún más el posicionamiento del paciente durante la cirugía MIS y endoscópica.

### Aplicaciones

Ideal para cirugías generales y aplicaciones específicas

<p>Cirugía de tórax, riñón y vesícula biliar</p> 	<p>Cirugía de obstetricia y ginecología, urología y cistoscopia</p> 	<p>Cirugía lumbar</p> 
<p>Cirugía de vejiga por litotomía</p> 	<p>Cirugía artroscópica de rodilla</p> 	<p>Cardiovascular</p> 
<p>Neurocirugía</p> 	<p>Cirugía Oftalmológica y Facial / Plástica</p> 	<p>Cirugía total de hombro/artroscopia</p> 



# Características Principales

## Mesa Quirúrgica NOT 5600SKF

### Accesorios incluidos:

Braceras cantidad: 2  
Pieceros cantidad: 2  
Juego de cojines

### Accesorios opcionales:

#### FUNCIONES

E Nivelación automática  
A Control auxiliar



### Dispositivo de Tracción Ortopédica Telescópica Integrada



Esta unidad está equipada con una articulación doble y brazos de tracción telescópicos que permiten la rotación pélvica para lograr los requisitos de posicionamiento más exigentes. (Solo el modelo F cuenta con esta función).

## Preguntas Frecuentes

---

- 1. ¿La mesa es adecuada para todo tipo de cirugía?

Sí. La NOT-5600SKF está diseñada para cirugías generales y especializadas, incluyendo ginecología, urología, ortopedia, neurocirugía, cardiovascular, plástica y procedimientos MIS.

- 2. ¿La mesa es radiotranslúcida y permite toma de imágenes durante la cirugía?

Sí. La superficie de la mesa es radiotranslúcida y permite desplazamiento longitudinal de 300 mm para facilitar la toma de imágenes intraoperatorias.

- 3. ¿Qué peso de paciente soporta la mesa?

Soporta 360 kg de carga estática y 273 kg de carga de trabajo, brindando seguridad en todo tipo de procedimientos quirúrgicos.

- 4. ¿Qué ajustes de posición permite?

Ofrece Trendelenburg e inversión, inclinación lateral  $\pm 21^\circ$ , flexión/deflexión, movimientos de cabecera y espaldar.





# Equibiomedic

Venta, mantenimiento y alquiler de equipos biomédicos.



PBX: (057) (4) **444 08 38** / Cel: **310 460 7889**



[www.equibiomedic.com](http://www.equibiomedic.com)



Medellín - Colombia

